

Esterilización

Palex



La solución más completa en esterilización



Palex Medical SA

Parque Empresarial de Can Sant Joan
Francesc Viñas, 5
08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
Teléfono + 34 - 93 400 65 00
Telefax + 34 - 93 400 65 01
E-mail: palexmedical@palex.es
www.palexmedical.com



Kimberly-Clark* Kimguard*

4ª Generación de Hojas de Esterilización

Desde 1978, las hojas de esterilización Kimguard*, fabricadas en polipropileno SMS tejido sin tejer, han contribuido a mantener los instrumentos quirúrgicos estériles y suministrar sets listos para usar en quirófano en cualquier momento. Kimberly Clark* fue pionero en el desarrollo del SMS y a día de hoy es uno de los mayores suministradores a nivel mundial.

BENEFICIOS DE LAS HOJAS DE ESTERILIZACIÓN KIMGUARD*

- Barrera efectiva
- Alta resistencia
- Sin desprendimiento de partículas
- Sencilla presentación aséptica
- Disponible en distintos espesores KC 100, KC 200 y KC 500

Además las hojas de esterilización Kimberly Clark han dado un resultado excelente cuando se han valorado según los siguientes criterios:


- Resistencia al agua
- Penetración de vapor y óxido de etileno
- Caducidad y conservación de la esterilidad

Con las hojas de esterilización Kimguard* y One Step*, su equipo quirúrgico se mantendrá siempre estéril y presentado de forma aséptica.



Las capas externas de Spunbond en la hoja de esterilización **Kimguard***, proporcionan una excelente resistencia y durabilidad.

Las fibras en la capa interna de Meltblown proporcionan una óptima barrera contra las bacterias y líquidos, permitiendo la penetración de gases esterilizantes (vapor, óxido de etileno, formaldehído y plasma).

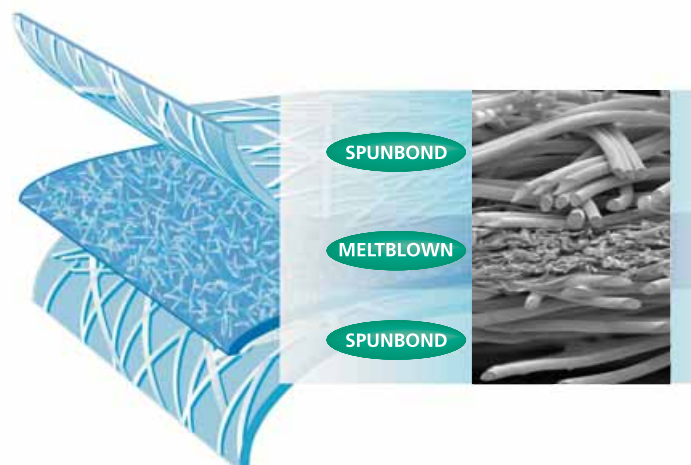

HOJAS DE ESTERILIZACIÓN DOBLES ONE STEP*

Kimguard* One Step*, consigue la protección de una hoja de esterilización doble, en un solo paso, gracias a las dos hojas de esterilización termoselladas, ahorrando tiempo al envolver y al desenvolver.



ENSAYOS Y NORMATIVA

Cumple con la norma UNE EN ISO 11607, "Envasado para productos sanitarios esterilizados terminalmente". Parte 1: Requisitos para los materiales, sistemas de barrera estéril y sistemas de envasado. Esta nueva norma es el resultado del proyecto de normalización entre la anterior versión de la ISO 11607 y la parte 1ª de la EN 868.

Sistema de Barrera Estéril - Envasado mínimo requerido para efectuar las funciones únicas requeridas de un envase sanitario: permitir la esterilización, proporcionar una barrera microbiana eficaz y permitir una presentación aséptica del producto hasta su momento de uso.

Las hojas de esterilización Kimguard* y One Step* han sido ensayadas por el laboratorio TNO Holanda mediante el "test" del Pack Final (bibliografía EN ISO 11607 como referencia [47]) obteniendo unos resultados excelentes.

Kimguard* y One Step* son conformes a la normativa europea EN 868 y están clasificados por la CE como un Dispositivo Médico Clase I de acuerdo con la Directiva Comunitaria 93/42/CEE.

Contenedores MicroStop®

Con sistema exclusivo de Seguridad

Los nuevos contenedores MicroStop® de Kls Martin son la solución más adecuada para la esterilización y conservación de todo el instrumental quirúrgico. Los contenedores MicroStop® disponen de un exclusivo e innovador sistema de barrera estéril sin filtro. Otras características como: rentabilidad, seguridad, resistencia y manejabilidad lo hacen único en el mercado.



Rentabilidad: Ciclo tras ciclo de esterilización esta ahorrando dinero en efectivo, tiempo y esfuerzos. Sin costes adicionales de filtros y precintos

Seguridad: Con un grado de retención de gérmenes probada superior a un 99,99997 %, es más efectivo que los filtros convencionales.

Resistencia: Fabricado en aluminio y plástico de excelente calidad, tiene una resistencia elevadísima tanto a la corrosión como a los golpes.


Manejabilidad: Fácil de abrir, fácil de limpiar, fácil control visual de la esterilidad, gracias al indicador visual rojo-verde. Al estar fabricado en aluminio es mucho más ligero que los contenedores de acero convencionales.



LA NUEVA FORMA DE SEGURIDAD

El disco MicroStop® es una excelente barrera estéril que actúa como un laberinto para los microbios. La especial geometría del disco hace que los microbios pierdan velocidad a lo largo del recorrido y finalmente queden atrapados en el disco.

Este nuevo sistema de seguridad ha sido ensayado por el prestigioso instituto Fraunhofer para Ingeniería interfacial y Biotecnología así como por el catedrático DR. Junghannß, Universidad de Anhalt, Köthen (RFA).

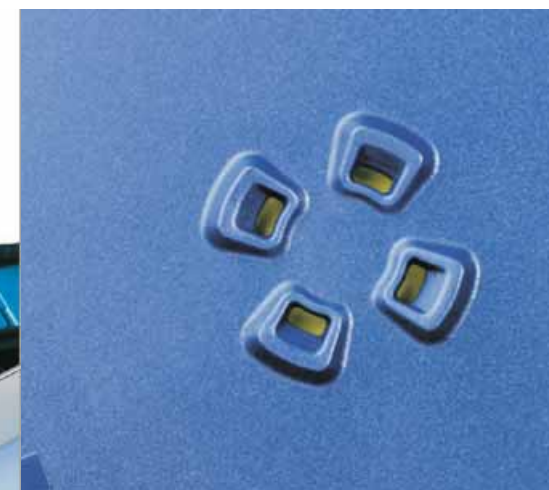

MicroStop® cumple con las normas internacionales relativas a sistemas de barrera estéril y sistemas de embalaje EN ISO 11607, parte 1 y 2 - edición 1:2006; EN 868, parte 8: 1999, DIN 58953, parte 9- edición 10:2002, marcaje CE conforme a la directiva comunitaria 93/42/CEE relativa a productos sanitarios. Homologado para procedimientos de esterilización por vapor conforme a EN 285/prA1 (2006-09) y validados conforme a EN ISO 17665, parte 1:2006.



Kimberly-Clark* Kimguard*

4ª Generación de Hojas de esterilización



Kimguard* KC 100

Código	Descripción	Presentación
385893	KC 100 30X30 cm	C/1000
385894	KC 100 38X38 cm	C/1000
385895	KC 100 50X50 cm	C/1000
385896	KC 100 60X60 cm	C/500
385897	KC 100 76X76 cm	C/300
385898	KC 100 91X91 cm	C/300
385899	KC 100 101X101 cm	C/250
385900	KC 100 121X121 cm	C/250
385994	KC 100 137X137 cm	C/100

One Step* KC 100

Código	Descripción	Presentación
385916	ONE STEP KC100 45X45 cm	C/480
385920	ONE STEP KC 100 60X60 cm	C/240
385927	ONE STEP KC 100 76X76 cm	C/144
385928	ONE STEP KC 100 91X91 cm	C/144
385930	ONE STEP KC 100 101X101 cm	C/120
385956	ONE STEP KC 100 121X121 cm	C/120
385957	ONE STEP KC 100 137X137 cm	C/96

Kimguard* KC 200

Código	Descripción	Presentación
385978	KC 200 45X45 cm	C/1000
385977	KC 200 60X60 cm	C/500
385979	KC 200 76X76 cm	C/300
385980	KC 200 91X91 cm	C/300
385981	KC 200 101X101 cm	C/250
385983	KC 200 121X121 cm	C/100
385984	KC 200 137X137 cm	C/100
385985	KC 200 137X182 cm	C/100

One Step* KC 200

Código	Descripción	Presentación
385959	ONE STEP KC 200 76X76 cm	C/144
385960	ONE STEP KC 200 91X91 cm	C/144
385961	ONE STEP KC 200 101X101 cm	C/120
385962	ONE STEP KC 200 121X121 cm	C/48
385963	ONE STEP KC 200 137X137 cm	C/48

Kimguard* KC 500

Código	Descripción	Presentación
385986	KC 500 60X60 cm	C/250
385987	KC 500 76X76 cm	C/250
385988	KC 500 91X91 cm	C/150
385989	KC 500 114X114 cm	C/100
385990	KC 500 121X121 cm	C/50
385991	KC 500 137X137 cm	C/50
385992	KC 500 137X182 cm	C/50
385993	KC 500 137X228 cm	C/50

One Step* KC 500

Código	Descripción	Presentación
385995	ONE STEP KC 500 60X60 cm	C/120
385996	ONE STEP KC 500 76X76 cm	C/120
385997	ONE STEP KC 500 91X91 cm	C/72
385998	ONE STEP KC 500 114X114 cm	C/48
385999	ONE STEP KC 500 121X121 cm	C/24
386000	ONE STEP KC 500 137X137 cm	C/24
386001	ONE STEP KC 500 137X182 cm	C/24

Complementos

Código	Descripción	Presentación
386156	Empapadores de bandeja 48x36 cm	C/400
386157	Filtros Kimguard contenedores redondos	C/1000
386158	Filtros Kimguard contenedores cuadrados	C/1000

Contenedores MicroStop®

Con sistema exclusivo de Seguridad



Contenedores MicroStop®

Código	Descripción
55-869-10	Contenedor MicroStop 600 x 300 x 110 mm
55-869-13	Contenedor MicroStop 600 x 300 x 140 mm
55-869-15	Contenedor MicroStop 600 x 300 x 160 mm
55-869-20	Contenedor MicroStop 600 x 300 x 210 mm
55-869-30	Contenedor MicroStop 600 x 300 x 270 mm

Código	Descripción
55-866-10	Contenedor MicroStop 300 x 300 x 110 mm
55-866-13	Contenedor MicroStop 300 x 300 x 140 mm
55-866-15	Contenedor MicroStop 300 x 300 x 160 mm
55-866-20	Contenedor MicroStop 300 x 300 x 210 mm
55-866-30	Contenedor MicroStop 300 x 300 x 270 mm

55-881-10	Contenedor MicroStop 470 x 300 x 110 mm
55-881-13	Contenedor MicroStop 470 x 300 x 140 mm
55-881-15	Contenedor MicroStop 470 x 300 x 160 mm



Cont. de evacuación MicroStop®

Código	Descripción
55-865-15	Cont. de Recogida MicroStop 300x300x160 mm
55-868-15	Cont. de Recogida MicroStop 600x300x160 mm

Contedores MicroStop® Mini-Set

Código	Descripción
55-861-40	Contenedor Microstop Mini-Set 310x189x65 mm
55-861-60	Contenedor Microstop Mini-Set 310x189x80 mm

Accesorios*

Descripción
· Etiquetas de codificación para detalles de contenido y destino
· Marquitos logísticos en distintos colores
· Bandejas de chapa de acero inoxidable perforadas
· Bandejas de acero inoxidable en malla metálica

Descripción
· Bandejas de acero inoxidable de chapa perforada y malla metálica
· Tabiques de separación para contenedores
· Tabiques de separación para bandejas
· Otros: paños, pinzas, etiquetas autoadhesivas, esteras de silicona...

* Consultar con Palex Medical para ver todas las posibilidades.

